




## Masques CPAP double voie et serre-têtes



Soins Intensifs ▪ Interfaces Patient

## Masques CPAP et serre-têtes

Les masques CPAP double voie d'Intersurgical offrent une interface patient confortable et sont disponibles en deux tailles : petit et moyen/grand adulte. Le bourrelet souple de forme anatomique s'adapte précisément quelle que soit la forme du visage. Les nombreux autres avantages sont indiqués ci-dessous :

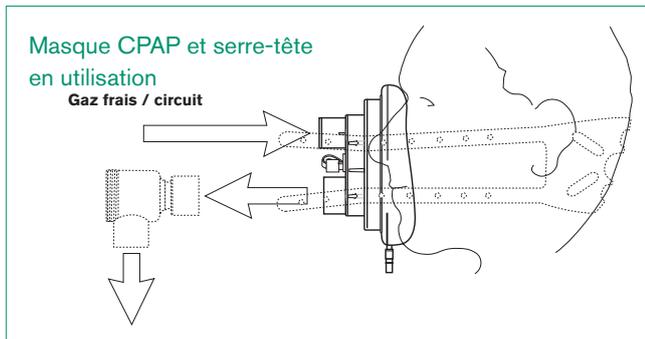

### Valves unidirectionnelles

Permettent au patient d'inspirer par le port supérieur et d'expirer par le port inférieur

### Valve de sécurité

Permet au patient de respirer en cas d'occlusion, ou si le patient dépasse le débit appliqué

### Bourrelet souple anatomique

S'adapte confortablement quelle que soit la forme du visage

### Valve de gonflage

Permet d'ajuster la pression du bourrelet pour améliorer le confort et l'étanchéité

### Prise de monitoring


Pour connecter de l'oxygène supplémentaire ou pour le monitoring

### Masque robuste et transparent

Facilite la visibilité des signes cliniques

### Six points de fixation

Pour optimiser l'étanchéité quand utilisés avec les serre-têtes Intersurgical

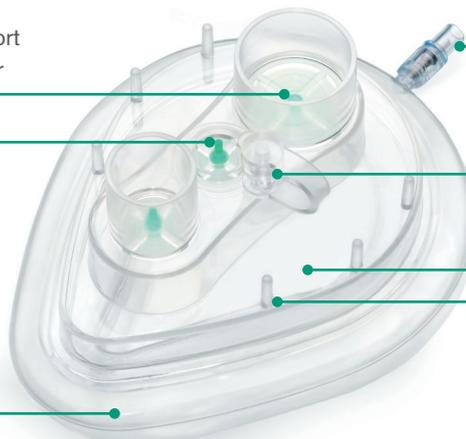

illustration

Référence	Description	Qté/bte
2222000	Masque CPAP double voie adulte, moyen/grand	12
2221000	Masque CPAP double voie adulte, petit	12
2224000	Serre-tête pour masque CPAP adulte, moyen/grand	12
2223000	Serre-tête pour masque CPAP adulte, petit	12

Faire une demande



7 bis, Rue Pelloutier, CS 11064 Croissy-Beaubourg, 77435 Marne La Vallée Cedex 2  
T: +33 (0)1 48 76 72 30 info@intersurgical.fr www.intersurgical.fr



Le fabricant Intersurgical Ltd est certifié ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 et ISO 14001:2015

**Pensez-y avant d'imprimer**  
Economisons les ressources.  
Si vous devez imprimer ce document, faites-le recto verso.

IS1.7 FR • Issue 3 01.18