



i-gel
INTERSURGICAL[®]
COMPLETE RESPIRATORY SYSTEMS

<http://es.i-gel.com>



Kit Control Vía Aérea

Todo lo necesario para preparar, insertar y asegurar la nueva cánula supraglótica

i-gel O₂

El manejo de la vía aérea ha evolucionado

Intersurgical presenta un innovador Kit para el Control de la Vía Aérea. Incorpora todo lo necesario para preparar, insertar y asegurar la nueva cánula supraglótica i-gel O₂.

i-gel es un dispositivo supraglótico de segunda generación realmente único lanzado por Intersurgical en



2007. Desde entonces, i-gel ha cambiado la gestión de las vías aéreas y a día de hoy, es usada en Anestesia y Resucitación en todo el mundo.

Almohadilla no inflable

La forma, suavidad y contorno de su almohadilla son reflejo exacto de la anatomía perilaríngea para crear un ajuste anatómico perfecto. Este innovador concepto permite prescindir de la almohadilla inflable convencional. i-gel O₂ se adapta armónicamente a la anatomía del paciente, de forma que se reducen significativamente o incluso se eliminan compresiones y desplazamientos traumáticos de tejidos circundantes.

Canal gástrico

Permite aspirar el contenido estomacal, garantizando la seguridad del paciente. Al ser independiente del canal ventilatorio posibilita la introducción, si es necesario, de tubos endotraqueales a través de este último.

Inserción


i-gel O₂ es asombrosamente fácil de utilizar. La inserción es rápida y normalmente se consigue en menos de 5 segundos. La técnica de inserción es tan sencilla, fiable e intuitiva que el usuario no necesita introducir los dedos en la boca del paciente.

Fijación

El kit i-gel O₂ incluye una cinta de fijación para asegurar la posición de i-gel O₂. Esta sujeción se consigue fácilmente deslizando la cinta debajo del cuello del paciente y asegurándola en el anillo de fijación ubicado en el collar de i-gel O₂. Esta opción hace que su uso sea ideal en los casos donde la cinta adhesiva es inapropiada, tales como en pacientes con barba o collarín.

Gestión natural de la vía aérea

i-gel O₂ se posiciona de forma precisa y natural sobre la estructura laríngea, proporcionando un sellado perilaríngeo fiable sin necesidad de almohadilla inflable.

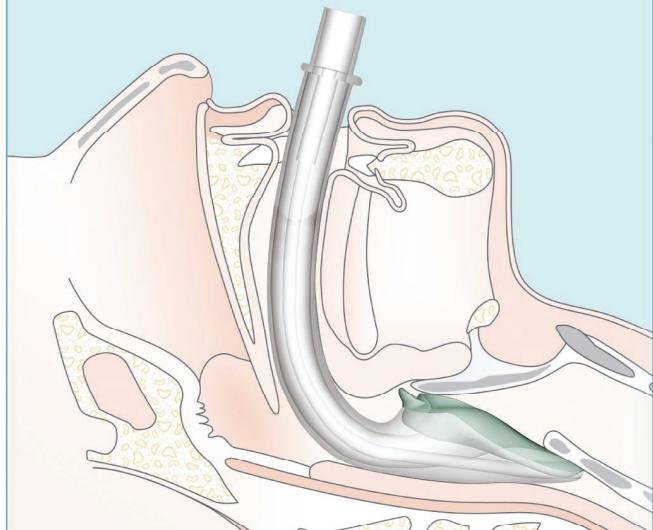

i-gel O₂ en resucitación

i-gel O₂ también puede utilizarse en el control de la vía aérea en procedimientos de resucitación de pacientes adultos inconscientes, en situaciones extra-hospitalarias o intra-hospitalarias, por personal debidamente entrenado y experimentado en el uso de dispositivos de manejo de la vía aérea y técnicas avanzadas de resucitación.

Rango de tamaños

i-gel O₂ está disponible en tres tamaños de adultos lo que hace que su uso sea adecuado en pacientes desde 30 Kg hasta más de 90 Kg.

Más información en
<http://es.i-gel.com>

La nueva i-gel O₂

Anillo de fijación

Asegura la posición de i-gel O₂ con la cinta de fijación.

Canal gástrico

Mejora la seguridad del paciente proporcionando un mecanismo para el manejo del flujo regurgitado.

Almohadilla no inflable

Elimina la necesidad de inflar la almohadilla después de su inserción, permitiendo una fácil y rápida inserción.

Puerto de oxígeno adicional

Para administración de oxigenación pasiva como componente del protocolo de resucitación cardiocerebral.

Estabilizador de la cavidad bucal

Facilita la inserción y elimina el riesgo de rotación.

Retentor de la epiglótis

Reduce la posibilidad de repliegue de la epiglótis y de obstrucción de la vía aérea.

i-gel es un producto de un solo uso, libre de látex y PVC



El kit i-gel O₂ está disponible para 3 tamaños de adultos e incluye:

- Cánula supraglótica i-gel O₂.
- Sobre lubricante para una rápida y fácil lubricación de i-gel O₂ antes de su inserción.
- Cinta de fijación que asegura la posición de i-gel O₂.
- Sonda de aspiración de 12 FG con un tamaño adecuado para pasar por el canal gástrico y vaciar el contenido estomacal.



Dispositivos Supraglóticos - Gama completa

REF.	CÁNULA SUPRAGLÓTICA I-GEL O ₂	UDS./CAJA
I8703	■ Tamaño 3. Kit control de vía aérea i-gel O ₂ . Incluye i-gel O ₂ , cinta de fijación, sonda de aspiración y sobre de lubricante. Pacientes 30-60 kg.	6
I8704	■ Tamaño 4. Kit control de vía aérea i-gel O ₂ . Incluye i-gel O ₂ , cinta de fijación, sonda de aspiración y sobre de lubricante. Pacientes 50-90 kg.	6
I8705	■ Tamaño 5. Kit control de vía aérea i-gel O ₂ . Incluye i-gel O ₂ , cinta de fijación, sonda de aspiración y sobre de lubricante. Pacientes + 90 kg.	6



REF.	CÁNULA SUPRAGLÓTICA I-GEL	UDS./CAJA
I8201	■ Tamaño 1.0. Cánona supraglótica i-gel neonatal. Pacientes 2-5 kg.	10
I8215	■ Tamaño 1.5. Cánona supraglótica i-gel infantil. Pacientes 5-12 kg.	10
I8202	■ Tamaño 2.0. Cánona supraglótica i-gel pediátrica pequeña. Pacientes 10-25 kg.	10
I8225	■ Tamaño 2.5. Cánona supraglótica i-gel pediátrica grande. Pacientes 25-35 kg.	10
I8203	■ Tamaño 3. Cánona supraglótica i-gel adulto pequeña. Pacientes 30-60 kg.	25
I8204	■ Tamaño 4. Cánona supraglótica i-gel adulto mediana. Pacientes 50-90 kg.	25
I8205	■ Tamaño 5. Cánona supraglótica i-gel adulto grande. Pacientes + 90 kg.	25



REF.	MASCARILLA LARÍNGEA SILICONA "SUPRA"	UDS./CAJA
I8101	Tamaño 1. Mascarilla laríngea "Supra" de silicona. Pacientes <5 kg.	20
I8115	Tamaño 1.5. Mascarilla laríngea "Supra" de silicona. Pacientes 5-10 kg.	20
I8102	Tamaño 2. Mascarilla laríngea "Supra" de silicona. Pacientes 10-20 kg.	20
I8125	Tamaño 2.5. Mascarilla laríngea "Supra" de silicona. Pacientes 20-30 kg.	20
I8103	Tamaño 3. Mascarilla laríngea "Supra" de silicona. Pacientes 30-50 kg.	20
I8104	Tamaño 4. Mascarilla laríngea "Supra" de silicona. Pacientes 50-70 kg.	20
I8105	Tamaño 5. Mascarilla laríngea "Supra" de silicona. Pacientes +70 kg.	20



REF.	MASCARILLA LARÍNGEA "SOLUS"	UDS./CAJA
I8001	Tamaño 1. Mascarilla laríngea "Solus". Pacientes <5 kg.	20
I8015	Tamaño 1.5. Mascarilla laríngea "Solus". Pacientes 5-10 kg.	20
I8002	Tamaño 2. Mascarilla laríngea "Solus". Pacientes 10-20 kg.	20
I8025	Tamaño 2.5. Mascarilla laríngea "Solus". Pacientes 20-30 kg.	20
I8003	Tamaño 3. Mascarilla laríngea "Solus". Pacientes 30-50 kg.	20
I8004	Tamaño 4. Mascarilla laríngea "Solus". Pacientes 50-70 kg.	20
I8005	Tamaño 5. Mascarilla laríngea "Solus". Pacientes +70 kg.	20



REF.	MASCARILLA LARÍNGEA "SOLUS" REFORZADA	UDS./CAJA
I8002001	Tamaño 2. Mascarilla laríngea "Solus" reforzada. Pacientes 10-20 kg.	20
I8025001	Tamaño 2.5. Mascarilla laríngea "Solus" reforzada. Pacientes 20-30 kg.	20
I8003001	Tamaño 3. Mascarilla laríngea "Solus" reforzada. Pacientes 30-50 kg.	20
I8004001	Tamaño 4. Mascarilla laríngea "Solus" reforzada. Pacientes 50-70 kg.	20
I8005001	Tamaño 5. Mascarilla laríngea "Solus" reforzada. Pacientes +70 kg.	20

