


Ларингеальные маски Solus

Полная линейка ларингеальных масок одноразового использования

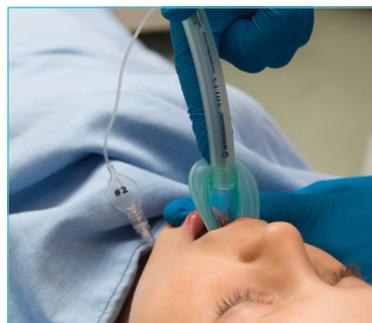

Обеспечение проходимости дыхательных путей ▪ Изделия для обеспечения проходимости дыхательных путей

Ларингеальные маски Solus™

Полная линейка ларингеальных масок одноразового использования для анестезиологии и неотложной помощи

Предназначена для различных клинических нужд, все ларингеальные маски Intersurgical одноразового использования, не содержат латекс и поставляются в стерильном виде.

Материал с низким трением - низкофрикционный

Уменьшение сопротивления при введении/извлечении

Классическая форма манжеты

Надежность при использовании

Необходимая информация

Видна на вставке для быстрого ознакомления



Встроенная в воздуховод линия раздувания манжеты

Уменьшает риск повреждения при использовании

Высококачественный клапан

Для обеспечения постоянной герметичности манжеты



▶ Видеоматериалы можно посмотреть на сайте www.intersurgical.com



Solus™ Standard (стандартные, классические)

Благодаря использованию специально подобранных материалов, Solus Standard изготовлен качественно, с гибкостью и прочностью, необходимыми для эффективной работы в линейке изделий для ответственного клинического применения, включая детскую анестезиологию. В наличии полная линейка размеров изделий, от взрослых до новорожденных.



Сделать запрос

Код	Описание	Размер	Вес	Кол-во/уп.
8005000	Ларингеальная маска Solus Standard, большая для взрослых	5	70+kg	20
8004000	Ларингеальная маска Solus Standard, средняя для взрослых	4	50–70kg	20
8003000	Ларингеальная маска Solus Standard, малая для взрослых	3	30–50kg	20
8025000	Ларингеальная маска Solus Standard, большая для детей	2.5	20–30kg	20
8002000	Ларингеальная маска Solus Standard, малая для детей	2	10–20kg	20
8015000	Ларингеальная маска Solus Standard, для младенцев	1.5	5–10kg	20
8001000	Ларингеальная маска Solus Standard, для новорожденных	1	<5kg	20

Ⓢ Поставляются в стерильном виде



Solus Satin (более мягкий воздуховод)

Solus Satin - линейка ларингеальных масок одноразового использования обладает более мягкой трубкой воздуховода для обеспечения большей гибкости. Более востребована некоторыми специалистами. Ее можно отнести к эконом-продуктам этой группы изделий.



Сделать запрос

Код	Описание	Размер	Вес	Кол-во/уп.
8005003	Ларингеальная маска Solus Satin, большая для взрослых	5	70+kg	20
8004003	Ларингеальная маска Solus Satin, средняя для взрослых	4	50–70kg	20
8003003	Ларингеальная маска Solus Satin, малая для взрослых	3	30–50kg	20

Solus™ MRI (совместимы с МРТ)

Линейка одноразовых стерильных ларингеальных масок, оборудованных специально протестированными клапанами без содержания металла, которые гарантируют отсутствие искажения магнитного поля в магнитно-резонансном томографе. Пластиковый клапан был выбран для обеспечения полной надежности в течение всего срока годности каждого устройства.



Сделать запрос

Код	Описание	Размер	Вес	Кол-во/уп.
8005002	Ларингеальная маска Solus MRI-safe, большая для взрослых	5	70+kg	20
8004002	Ларингеальная маска Solus MRI-safe, средняя для взрослых	4	50–70kg	20
8003002	Ларингеальная маска Solus MRI-safe, малая для взрослых	3	30–50kg	20
8025002	Ларингеальная маска Solus MRI-safe, большая для детей	2.5	20–30kg	20
8002002	Ларингеальная маска Solus MRI-safe, малая для детей	2	10–20kg	20
8015002	Ларингеальная маска Solus MRI-safe, для младенцев	1.5	5–10kg	20
8001002	Ларингеальная маска Solus MRI-safe, для новорожденных	1	<5kg	20

Solus Curve (с изогнутым воздуховодом)

Ларингеальные маски Solus Curve предназначены для тех специалистов, кто предпочитает использовать ларингеальную маску с изогнутым воздуховодом




Сделать запрос

Код	Описание	Размер	Вес	Кол-во/уп.
8005050	Ларингеальная маска Solus Curve, большая для взрослых	5	70+kg	20
8004050	Ларингеальная маска Solus Curve, средняя для взрослых	4	50–70kg	20
8003050	Ларингеальная маска Solus Curve, малая для взрослых	3	30–50kg	20

Solus Flexible (гибкий воздуховод)

Solus Flexible обеспечивает идеальное решение для операций при отоларингологической, стоматологической, орально-верхнечелюстной и глазной хирургии, где жесткость изделия для обеспечения проходимости дыхательных путей может затруднить хирургический доступ. Армированная трубка обеспечивает гибкость без перегибов и может быть в любое время отодвинута во время операции.

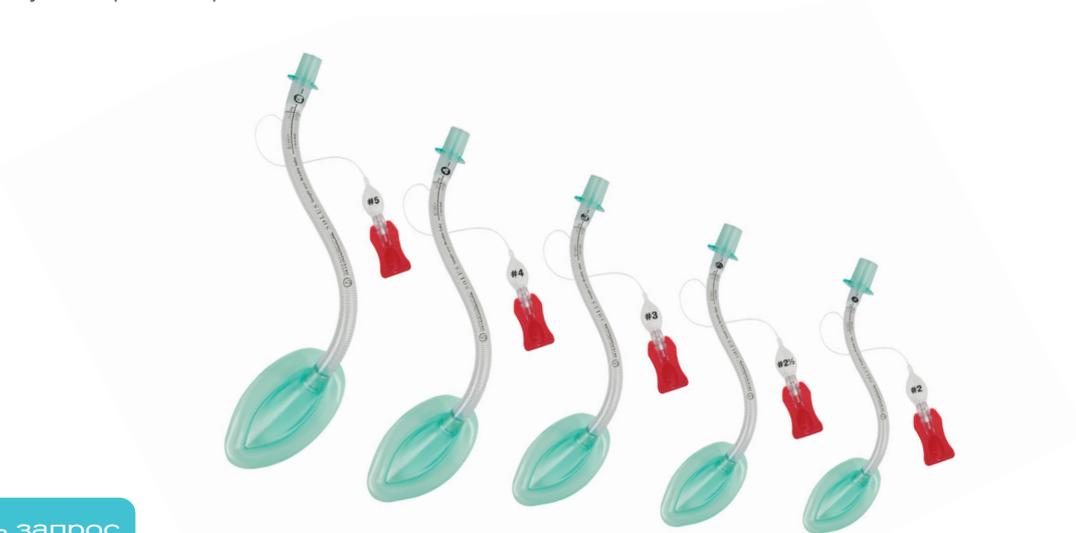

Сделать запрос

Код	Описание	Размер	Вес	Кол-во/уп.
8005001	Армированная ларингеальная маска Solus Flexible, большая для взрослых	5	70+kg	20
8004001	Армированная ларингеальная маска Solus Flexible, средняя для взрослых	4	50–70kg	20
8003001	Армированная ларингеальная маска Solus Flexible, малая для взрослых	3	30–50kg	20
8025001	Армированная ларингеальная маска Solus Flexible, большая детская	2.5	20–30kg	20
8002001	Армированная ларингеальная маска Solus Flexible, малая детская	2	10–20kg	20

 Поставляются в стерильном виде

ISO 6.1 • Issue 11 02.17



ЗАО «Интерседжикал», 115114 Россия, Москва, Дербеневская наб., 11, корп. В офис 904
T: +7 (495) 771 6809 F: +7 (495) 771 6809 info@intersurgical.ru www.intersurgical.ru

UK ▪ Ireland ▪ France ▪ Germany ▪ Spain ▪ Portugal
Italy ▪ Benelux ▪ Sweden ▪ Denmark ▪ Lithuania ▪ Russia
Czech Republic ▪ Turkey ▪ South Africa ▪ China ▪ Japan
Taiwan ▪ Philippines ▪ USA ▪ Canada ▪ Colombia ▪ Australia



Задумайтесь прежде чем распечатать

Берегите энергию и бумагу Если вам необходимо распечатать данный документ, распечатайте, пожалуйста, с обеих сторон

Компания Intersurgical сертифицирована по международному стандарту ISO 14001, ISO 9001 и ISO 13485