



Gamme Hydro-Trach™ T



Gestion des Voies Aériennes ▪ Échangeurs de Chaleur et d'Humidité

Gamme Hydro-Trach™ T

Conçue pour un usage sur patients trachéotomisés

L'Hydro-Trach T est un dispositif échangeur de chaleur et d'humidité destiné au patient en respiration spontanée, afin de réduire la perte de chaleur et d'humidité lors de la respiration.

Chez un patient trachéotomisé, le système normal de maintien de la température et de l'humidité est contourné par la pose d'une canule de trachéotomie. La perte possible de chaleur et d'humidité peut conduire à de graves complications.

Ces complications peuvent entraîner une rétention des expectorations, une atelectasie, une formation de bouchons muqueux et une occlusion de la canule.

Plusieurs caractéristiques uniques font de l'Hydro-Trach T un dispositif idéal pour un usage prolongé chez des patients trachéotomisés respirant spontanément.


Coque transparente

Facilite l'inspection visuelle en cas d'accumulation des sécrétions



Système anti-occlusion

Permet à l'élément ECH de partiellement se déloger en cas d'occlusion totale ou de forte toux

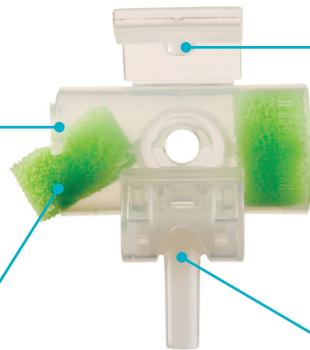

Orifice d'aspiration avec languette refermable

Facilite l'aspiration sans retirer le dispositif

Petit et léger

Réduit la traction sur le raccord patient

Embout oxygène intégré à rotule

Permet le raccordement d'un tuyau à oxygène sans besoin d'un adaptateur séparé, pouvant être égaré quand il n'est pas utilisé

Référence	Description	Longueur	Qté/bte
1873000 (S*)	ECH Hydro-Trach T Mk II		25 (100*)
1874000 (S*)	ECH Hydro-Trach T Mk II avec embout à rotule et tuyau oxygène	1.8m	40 (20*)

Référence	1873000 (S*)	1874000 (S*)
Perte d'humidité	13.2mg H ₂ O/L	13.2mg H ₂ O/L
Restitution d'humidité	26mg H ₂ O/L	26mg H ₂ O/L
Résistance à 30L/min	0.3cm H ₂ O	0.3cm H ₂ O
Résistance à 60L/min	0.6cm H ₂ O	0.6cm H ₂ O
Volume compressible	19ml	19ml
Poids	8g	8g
Connexions	15F	15F
Volume courant minimum	>60ml	>60ml
Accessoires		Tuyau oxygène 1.8m

Fi O₂ moyenne à différents débits d'O₂

Oxygène (L/min)	Fi O ₂ à 15 RPM
1	26.4%
2	31.8%
3	35.0%
4	38.2%
5	41.8%
6	44.9%
7	47.4%
8	49.6%

S Version stérile disponible

(S*) Ajoutez un S à la fin du code produit à sept chiffres pour commander la version stérile du produit ex. 1873000S (la quantité par boîte des produits stériles est indiquée entre parenthèses).

IS12.2 INT FR ▪ Issue 11 06.23



7 bis, Rue Pelloutier, CS 11064 Croissy-Beaubourg, 77435 Marne-La-Vallée Cedex 2
T: +33 (0)1 48 76 72 30 info@intersurgical.fr www.intersurgical.fr



Le fabricant Intersurgical Ltd est certifié
ISO 9001:2015, ISO 13485:2016,
ISO 14001:2015 et MDSAP